

PT

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA IMPORTANTES NÃO DESTRUIR



LER TODAS AS INSTRUÇÕES ANTES DE UTILIZAR O VENOM 2



PERIGO

Para reduzir o risco de choque elétrico:

- Retirar sempre este dispositivo da tomada elétrica imediatamente após o carregamento e antes de o limpar ou utilizar.
- Não apanhar um dispositivo que tenha caído na água. Retirar imediatamente da tomada.
- Não utilizar quando estiver no banho ou no duche.
- Não colocar nem guardar o dispositivo num local onde possa cair ou ser puxado para dentro de uma banheira ou lavatório. Não colocar nem deixar cair dentro de água ou de outro líquido.
- Manter seco. Não utilizar em condições húmidas ou molhadas.



AVISO

Leia todos os avisos e instruções de segurança antes de utilizar este dispositivo. O não cumprimento dos avisos e instruções pode resultar em choque elétrico, incêndio e/ou ferimentos graves.



AVISO

PARA REDUZIR O RISCO DE QUEIMADURAS, CHOQUE ELÉTRICO, INCÊNDIO E FERIMENTOS CORPORAIS, ESTE PRODUTO DEVE SER UTILIZADO DE ACORDO COM AS SEGUINTE INSTRUÇÕES:

- Utilize este dispositivo apenas para a utilização prevista, conforme descrito neste manual.
- Isto não é um brinquedo. Destina-se a ser utilizado apenas por adultos. Não utilize em caso de ferimentos.
- Este dispositivo nunca deve ser deixado sem vigilância quando ligado à corrente. Desligue sempre este dispositivo da tomada elétrica imediatamente após o carregamento e antes de o utilizar ou limpar. Retire da tomada elétrica quando não o estiver a utilizar e antes de colocar ou retirar peças.
- Não utilize o aparelho debaixo de uma manta ou almofada. Tal poderá resultar num aquecimento excessivo, causando um incêndio, choque elétrico ou ferimentos.
- Nunca utilize o dispositivo se este tiver um cabo ou ficha danificados, não estiver a funcionar corretamente, tiver caído ou se estiver danificado ou molhado. Devolva o dispositivo a um centro de assistência para que seja examinado e reparado.
- Não transporte este dispositivo segurando-o pelo cabo nem utilize o cabo como pega.
- Mantenha o cabo afastado de superfícies aquecidas.
- Nunca deixe cair nem introduza objetos nas aberturas.
- Adequado APENAS para locais secos. Não utilize no exterior nem em superfícies molhadas e não exponha a água ou chuva.
- Utilize o produto apenas de acordo com estes materiais de instrução. Além disso, os materiais de instrução estão disponíveis em hyperice.com.
- Utilize as superfícies aquecidas com cuidado. Pode provocar queimaduras graves. Não utilize sobre áreas cutâneas sem sensibilidade ou em zonas com má circulação sanguínea. A utilização sem supervisão de calor por crianças ou pessoas incapacitadas pode ser perigosa.
- Podem ocorrer temperaturas suficientemente elevadas para causar queimaduras, independentemente da definição de controlo. Não utilize em crianças nem em pessoas inválidas ou que estejam a dormir ou inconscientes. Não utilize em áreas cutâneas sem sensibilidade ou em pessoas com má circulação sanguínea. Verifique frequentemente a pele em contacto com a área aquecida do dispositivo para reduzir o risco de formação de bolhas. Retire imediatamente do corpo e desligue o dispositivo se começar a sentir desconforto.
- Este dispositivo não deve ser utilizado por pessoas sem sensibilidade ao calor nem por outras pessoas muito vulneráveis que não tenham capacidade para reagir ao aquecimento excessivo.
- Se o dispositivo for utilizado enquanto dorme, com os controlos definidos para uma temperatura elevada, o utilizador pode sofrer queimaduras na pele ou uma insolação.

- Não esmagar. Evite dobrar com vincos acentuados. Não dobre o Venom 2 enquanto estiver a ser utilizado.
- Não modifique nem tente reparar o dispositivo. Não contém peças que possam ser reparadas pelo utilizador. Contacte a Hyperice para obter assistência.
- Evite que o dispositivo inicie acidentalmente. Certifique-se de que o botão de alimentação está na posição de desligado antes de pegar no dispositivo ou de o transportar ou guardar.



AVISO

Não utilize o Venom 2, nem qualquer dispositivo térmico ou de vibração, sem primeiro obter aprovação do seu médico se qualquer uma das seguintes situações se aplicar: gravidez, diabetes com complicações como neuropatia ou danos na retina, utilização de pacemakers, cirurgia recente, epilepsia ou enxaquecas, hérnia discal, espondilolistese, espondilólise ou espondilose, substituições recentes e articulações ou presença de DIU, pinos ou placas metálicas ou quaisquer preocupações com a sua saúde física. As crianças e os indivíduos debilitados deverão ser acompanhados por um adulto aquando da utilização de um dispositivo térmico ou de vibração. Estas contraindicações não significam que não pode utilizar este dispositivo, mas recomendamos que consulte primeiro um médico. Está em curso uma investigação sobre os efeitos do calor e da vibração em condições médicas específicas. Provavelmente, tal irá resultar na redução da lista de contraindicações apresentada acima. A experiência prática demonstrou que a integração de um exercício vibratório num plano de tratamento apresenta benefícios em vários casos. A utilização deverá ser realizada mediante o aconselhamento e acompanhamento de um médico, especialista ou fisioterapeuta.














ADVERTÊNCIA

Ao utilizar um dispositivo elétrico, devem ser sempre seguidas precauções básicas, incluindo o seguinte:

- Destina-se a ser utilizado apenas por adultos.
- Este dispositivo não se destina a ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou que não possuam a experiência e o conhecimento necessários para utilizar este dispositivo, a não ser que tenham supervisão ou que tenham recebido instruções relativas à utilização do dispositivo de uma pessoa responsável pela sua segurança.
- O dispositivo tem uma superfície aquecida. As pessoas sensíveis ao calor devem ser cuidadosas ao utilizar o dispositivo. Este dispositivo não deve ser utilizado por pessoas sem sensibilidade ao calor nem por outras pessoas muito vulneráveis que não tenham capacidade para reagir ao aquecimento excessivo.
- Não deixe as crianças sem supervisão, de modo a garantir que estas não brincam com o dispositivo.

- Desligue o carregador da bateria após o carregamento ou antes da utilização. O Venom 2 não funciona enquanto o carregador estiver ligado à bateria.
- Nunca deixe o Venom 2 a funcionar ou a carregar sem vigilância.
- Não mergulhe o dispositivo em água. Limpe apenas com um pano húmido.
- Mantenha os líquidos afastados do dispositivo.
- Utilize apenas numa zona limpa e seca do corpo ou sobre roupas leves, conforme ilustrado nestes materiais de instruções.
- Não utilize o Venom 2 em pele húmida ou sobre pomadas tóxicas, especialmente as que contêm ingredientes que produzem calor, pois tal pode provocar queimaduras na pele.
- Utilize um tecido, peça de vestuário ou toalha finos entre o produto e a pele para reduzir a possibilidade de queimaduras.
- Podem ocorrer queimaduras, independentemente da definição de controlo. Verifique a pele sob o produto com frequência e remova-o imediatamente do corpo e desligue-o se começar a sentir desconforto.
- Não coloque quaisquer objetos metálicos entre o Venom 2 e o corpo, incluindo ganchos ou outros elementos de fixação metálicos, para prender o Venom 2.
- Não tente desmontar.
- Não adultere nem altere o Venom 2 de forma alguma.
- Examine cuidadosamente o dispositivo antes de cada utilização. Se o dispositivo apresentar sinais de deterioração, tais como formação de fendas, empolamento ou fissuração, envie-o a um centro de assistência autorizado da Hyperice para que seja inspecionado e reparado.
- Não utilize em locais onde estejam a ser utilizados produtos aerossóis (spray) ou onde esteja a ser administrado oxigénio.
- Não se sente em cima do Venom 2, não se encoste a este nem o esmague.
- Não esmague o dispositivo colocando itens por cima do mesmo enquanto está guardado.
- Examine frequentemente o dispositivo quanto a sinais de desgaste ou danos. Se estes estiverem presentes, se o dispositivo tiver sido utilizado incorretamente ou não funcionar, devolva-o a um centro de assistência autorizado da Hyperice para que seja examinado e reparado.
- A limpeza e a manutenção não devem ser efetuadas por crianças sem supervisão.
- Não se destina a ser utilizado em hospitais. Destinado a um uso doméstico ou comercial.

GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES

Símbolo	Descrição	Localização
	Ler as instruções antes de utilizar	No manual e na cápsula
	Corrente contínua	Na cápsula
	Corrente alternada	No carregador
	Nome e morada do fabricante	No manual e na cápsula
	<p>Recolha seletiva para resíduos elétricos e equipamento eletrónico.</p> <p>Esta marcação indica que este produto não deve ser eliminado juntamente com outros resíduos domésticos, em toda a UE. Para evitar possíveis danos para o ambiente ou para a saúde humana decorrentes da eliminação não controlada de resíduos, recicle-os de forma responsável para promover a reutilização sustentável dos recursos materiais. Para devolver o seu dispositivo usado, utilize os sistemas de devolução e recolha ou contacte o revendedor onde o produto foi adquirido. O revendedor pode levar este produto para reciclagem segura a nível ambiental.</p>	Na banda
	Não lavar	Na banda
	Não lavar a seco	Na banda
	Não utilizar máquina de secar	Na banda
	Não utilizar lixívia	Na banda
	Não passar a ferro	Na banda
	Símbolo de aviso para identificar um risco que pode levar à morte ou a ferimentos graves	No manual e na cápsula

	Símbolo de advertência para indicar a necessidade de o utilizador consultar a informação de alerta importante das instruções de utilização, como avisos e precauções que, por várias razões, não podem ser apresentados na própria unidade de controlo médica	No manual
	Dica para permitir orientação para uma utilização mais fácil. Risco para o utilizador considerado negligenciável	No manual
	Conformidade europeia	Na banda
	RCM Austrália	Na banda
	Fabricado na China	Na banda
	Marcação do Reino Unido	Na banda
	Reciclar bateria de íões de lítio	Na banda
	Símbolo de reciclagem	Na banda
	Controlo de calor	Na cápsula
	Ligar/desligar	Na cápsula
	Controlo de vibração	Na cápsula
	Cabo de alimentação amovível, utilize apenas com o carregador fornecido com o dispositivo.	No manual e na cápsula

TECNOLOGIA SEM FIOS BLUETOOTH®

A marca nominativa e os logótipos Bluetooth® são propriedade da Bluetooth SIG, Inc. e qualquer utilização destas marcas pela Hyperice é efetuada sob licença. Na eventualidade pouco provável de perda de uma ligação estável Bluetooth, o sistema tenta reestabelecer a sua ligação automaticamente. O dispositivo Venom 2 é totalmente autónomo e continua a funcionar normalmente mesmo em caso de perda de ligação. Se esta unidade de controlo causar interferência, o que pode ser determinado ligando e desligando a unidade de controlo, o utilizador deve tentar corrigir a interferência reorientando ou mudando a localização da unidade de controlo, aumentando a distância de separação entre o equipamento e a unidade de controlo ou ligando a unidade de controlo a uma tomada diferente num circuito, caso esteja ligada.

A unidade de controlo do Venom 2 utiliza a tecnologia sem fios Bluetooth 5.0 com as seguintes especificações de rádio:FCC ID: 2AWQY-VENOM2, IC: 26929-VENOM2, Frequência: 2402 a 2480 MHz

Esta unidade está em conformidade com a parte 15 das regras da FCC. O funcionamento está sujeito às seguintes duas condições: (1) esta unidade de controlo não pode causar interferência grave e (2) esta unidade de controlo deve aceitar qualquer interferência recebida, incluindo interferência que possa causar um funcionamento indesejável. Esta unidade de controlo está em conformidade com o(s) padrão(ões) RSS isento(s) de licença da Indústria do Canadá. O funcionamento está sujeito às seguintes duas condições: (1) esta unidade de controlo não pode causar interferência e (2) esta unidade de controlo deve aceitar qualquer interferência, incluindo interferência que possa causar um funcionamento indesejável da unidade.

Este equipamento está em conformidade com os limites de exposição à radiação definidos pela FCC/ISED para ambientes não controlados e cumpre com os requisitos das diretrizes de exposição à radiofrequência (RF) da FCC e com as regras de exposição à radiofrequência (RF) RSS-102 da ISED. Este equipamento emite níveis muito baixos de energia de RF que estão em conformidade com os limites sem teste de taxa de absorção específica (SAR).

As alterações ou modificações não expressamente aprovadas pela parte responsável pela conformidade poderão anular a autoridade do utilizador de operar o equipamento.

Este equipamento foi testado e considerado em conformidade com os limites para um dispositivo digital de Classe B, de acordo com a Parte 15 das normas da FCC. Estes limites foram concebidos para proporcionar uma proteção razoável contra interferências nocivas numa instalação residencial. Este equipamento gera, utiliza e pode radiar energia de radiofrequência e, se não for instalado e utilizado de acordo com as instruções, pode causar interferências nocivas às comunicações de rádio. No entanto, não é possível garantir que não ocorra interferência numa instalação específica.

Se este equipamento vier a causar interferência nociva à emissão de rádio ou televisão, o que se pode verificar desligando e ligando o equipamento, aconselha-se que o utilizador tente corrigir a interferência aplicando uma ou mais das seguintes medidas:

- Reorientar ou reposicionar a antena recetora.
- Aumentar a distância entre o equipamento e o recetor.
- Ligar o equipamento a uma tomada num circuito diferente daquele ao qual o recetor está ligado.
- Solicitar a ajuda do revendedor ou de um técnico experiente em rádio/TV.

INFORMAÇÃO DA BATERIA INTERNA

Esta unidade do Venom 2 está equipada com uma bateria de iões de lítio recarregável. A bateria interna foi concebida para permitir a utilização do Venom 2 em qualquer lugar, mesmo quando não estiverem disponíveis tomadas de alimentação.

O Venom 2 pode precisar de ser carregado antes da primeira utilização. Uma bateria totalmente carregada possui carga para mais de 2 horas de utilização contínua. São necessárias, aproximadamente, 4 horas para carregar completamente a bateria quando a unidade de controlo está ligada e não está a ser utilizada.

- Este dispositivo contém uma bateria de iões de lítio. A bateria só pode ser substituída por uma pessoa qualificada com uma ferramenta específica. Contacte a Hyperice para obter assistência ou reparação. Este dispositivo contém baterias que não são substituíveis. Quando a bateria estiver no fim de vida útil, o dispositivo deve ser eliminado de forma adequada. A eliminação da bateria tem de ser efetuada em segurança e de acordo com as normas aplicáveis numa instalação de eliminação ou reciclagem de resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos.



AVISO

- Siga todas as instruções de carregamento e não carregue a bateria ou o dispositivo fora do intervalo de temperatura especificado nas instruções. O carregamento incorreto ou a temperaturas fora do intervalo especificado pode danificar a bateria e aumentar o risco de incêndio.
- O intervalo de temperatura nominal para carregar a bateria é 0 °C~45 °C (32 °F~113 °F).
- Em condições indevidas, pode ser expelido líquido da bateria; evite o contacto. Em caso de contacto accidental com o líquido da bateria, lave com água. Se o líquido entrar em contacto com os olhos, procure assistência médica. O líquido expelido da bateria pode causar irritação ou queimaduras.
- Não utilize uma bateria ou um dispositivo danificados ou modificados. As baterias danificadas ou modificadas podem apresentar um comportamento imprevisível, resultando em incêndio, explosão ou risco de ferimentos.
- A bateria utilizada neste dispositivo pode apresentar um risco de incêndio ou de queimaduras químicas se for utilizada incorretamente. Não desmonte nem exponha uma bateria ou dispositivo a fogo ou a temperaturas excessivas. A exposição ao fogo ou a temperaturas superiores a 130 °C (265 °F) pode provocar uma explosão.
- Em caso de fuga na bateria, não permita que o líquido entre em contacto com a pele ou os olhos. Se tiver ocorrido contacto com o líquido da bateria, lave a área afetada com quantidades abundantes de água e procure assistência médica.
- Em caso de rutura da bateria, fuga grave ou explosão, evacue a área e coloque a área contaminada em quarentena. Ventile bem o espaço para eliminar quaisquer fumos, gases ou odores fortes.
- Olhos – enxague os olhos com água abundante durante 15 minutos; procure imediatamente assistência médica.
- Pele – enxague a área afetada com água abundante e sabão ou tome um duche durante 15 minutos.
- Inalação – coloque a pessoa num local com ar fresco e utilize respiração artificial, se necessário; procure assistência médica, se necessário.

- Ingestão – consulte imediatamente um médico ou um centro de controlo de venenos local
- Elimine a bateria usada imediatamente. Mantenha-a afastada das crianças. Não desmonte nem elimine no fogo.

INSTRUÇÕES DE FUNCIONAMENTO

CARREGAR A BATERIA



AVISO

O Venom 2 deve ser carregado apenas com o carregador Hyperice de 18 V CC com isolamento duplo (número de modelo MX24Z2-1801000) fornecido com o dispositivo. Não carregue o Venom 2 durante a noite nem deixe o Venom 2 sem vigilância quando este estiver a carregar ou a ser utilizado.

Para carregar, ligue o adaptador à porta de carregamento da bateria e ligue o cabo de carregamento a uma tomada. Carregue totalmente a bateria durante até seis horas antes da primeira utilização. A luz LED pisca para mostrar o nível da bateria e indicar um carregamento ativo. A carga total é indicada quando a luz LED deixa de piscar e permanece totalmente acesa a verde. O dispositivo apresenta o nível da bateria quando ligado. A unidade pode ser recarregada a qualquer altura e com qualquer nível da bateria. Não se recomenda que a bateria fique completamente descarregada até ao nível do LED laranja. Recarregue a unidade mensalmente para prolongar ao máximo a vida útil da bateria.

FUNCIONAMENTO

Envolva a parte do corpo pretendida (costas, perna ou ombro) com a banda de compressão e fixe as correias com um ajuste firme, mas confortável, de forma que as quatro cápsulas de vibração fiquem posicionadas conforme pretendido. Certifique-se de que a bateria está carregada. Prima o botão de ligar para ativar a unidade. O logótipo da Hyperice acende a vermelho para indicar que o Venom 2 está ativo. Escolha as opções de calor e vibração pretendidas com os botões na parte superior da cápsula. O dispositivo arranca automaticamente quando é premido o botão de calor ou vibração. Prima novamente o botão de calor ou vibração até ao nível pretendido. O dispositivo desliga-se automaticamente após 15 minutos sem ser necessária uma nova ação. O dispositivo vibra duas vezes para indicar o fim de uma sessão ou vibra três vezes para indicar que a bateria está fraca. Para continuar a utilização, basta premir novamente o botão de calor ou vibração e definir o nível pretendido. Uma bateria totalmente carregada alimenta o dispositivo durante cerca de duas horas no nível três de calor e durante mais tempo em níveis mais baixos.

LIGAR À APLICAÇÃO HYPERICE


Para ligar o dispositivo à aplicação Hyperice através de Bluetooth®, certifique-se de que o dispositivo está ligado, de que o Bluetooth está ativado no seu telemóvel e de que o dispositivo está dentro do alcance do seu telemóvel. O

LED do Bluetooth na cápsula irá piscar a azul, o que significa que está à espera de emparelhar. Se solicitado, toque em "Procurar dispositivos". Selecione o seu dispositivo quando aparecer no ecrã. Depois de emparelhar o Venom 2, a HyperSmart™ permite iniciar automaticamente a sua sessão e controlar as definições de calor e vibração a partir da aplicação Hyperice.

LIMPEZA E ARMAZENAMENTO

Utilize uma toalha ou um pano macio para limpar a humidade da unidade. Mantenha a unidade afastada de fontes de calor, líquidos e crianças. Guarde num local limpo, seco e fresco, ao abrigo da luz solar direta, quando não estiver a ser utilizado. Recomenda-se uma temperatura de armazenamento entre -10 °C e 25 °C (14 °F e 77 °F).

ESPECIFICAÇÕES

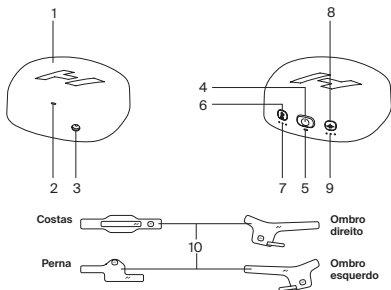

1. Cápsula do Venom 2
2. Indicador de Bluetooth®
3. Porta de carregamento
4. Botão de alimentação (LIGAR/DESLIGAR)
5. Indicador de bateria
6. Botão de ajuste de calor
7. Indicador do nível de calor
8. Botão de ajuste de vibração
9. Indicador do padrão de vibração
10. Banda de compressão

Frequência de vibração: 88 Hz

Calor: nível 1 45 °C (113 °F); nível 2 50 °C (122 °F); nível 3 55 °C (131 °F)

Peso: 1,6 kg (3 lb) (incluindo carregador)

Carregador de CA-CC: 100-240 V, 50/60 Hz, 0,7 A – 18,0 V 1,0 A 18,0 W
18,0 V —, 1,0 A, 5000 mAh, 18,0 Wh

GARANTIA

Este produto está abrangido por uma garantia limitada da Hyperice. Visite hyperice.com/warranty para consultar a garantia no seu país.