

PT-PT



PARA REDUZIR OS RISCOS DE CHOQUE ELÉTRICO, INCÊNDIO, FERIMENTOS PESSOAIS OU DANOS MATERIAIS, ESTE DISPOSITIVO DEVE SER UTILIZADO EM CONFORMIDADE COM OS SEGUINTE AVISOS, ADVERTÊNCIAS E INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA.

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA IMPORTANTES - INSTRUÇÕES ORIGINAIS



Leia todas as instruções antes de utilizar o Hypervolt Go 3.

PERIGO

Para reduzir o risco de choque elétrico:

- Desligue sempre este dispositivo da tomada elétrica imediatamente após a sua utilização e antes de o limpar.
- Não tente alcançar um dispositivo que tenha caído para dentro de água. Desligue-o imediatamente da tomada elétrica.
- Não utilize o dispositivo enquanto toma banho ou um duche.
- Não coloque nem armazene o dispositivo num local de onde possa cair ou ser puxado para dentro de uma banheira ou lavatório. Não coloque o dispositivo dentro de água, nem o deixe cair dentro de água ou outro líquido.

AVISO

Para reduzir o risco de queimaduras, incêndio, choques elétricos ou ferimentos a pessoas:

- Um dispositivo nunca deve ser deixado sem supervisão quando está ligado. Desligue-o da tomada quando não estiver em utilização e antes de instalar ou retirar peças.
- Não opere o dispositivo por baixo de um cobertor ou almofada. Pode ocorrer um aquecimento excessivo e causar um incêndio, choque elétrico ou ferimentos a pessoas.
- Este dispositivo pode ser utilizado por crianças com idade igual ou superior a 8 anos, e por pessoas com capacidades físicas, sensoriais e mentais reduzidas, ou com falta de experiência e conhecimento sobre como utilizar este dispositivo, desde que sejam devidamente supervisionadas ou tenham recebido formação relativamente à utilização do aparelho de uma forma segura e compreendam os perigos envolvidos.
- Utilize este dispositivo apenas para a sua utilização prevista, conforme descrito neste manual. Não utilize acessórios não recomendados pelo fabricante.

- Nunca opere este dispositivo caso tenha um cabo ou ficha danificados, se não estiver a funcionar corretamente, se tiver sido deixado cair ou estiver danificado, ou se tiver ficado molhado. Devolva o dispositivo a um centro de assistência para ser examinado e reparado.
- Não transporte este dispositivo pelo cabo de alimentação nem utilize o cabo como uma pega.
- Mantenha o cabo afastado de superfícies aquecidas.
- Nunca opere o dispositivo com as aberturas de ar obstruídas. Mantenha as aberturas de ar livres de algodão, cabelo ou de qualquer substância que possa dificultar o fluxo de ar.
- Nunca deixe cair ou insira qualquer objeto dentro de qualquer abertura.
- Não o utilize no exterior.
- Não opere o dispositivo quando estiverem a ser utilizados dispositivos de aerossol (pulverizadores) ou em locais onde esteja a ser administrado oxigénio.
- Nunca opere sobre uma superfície macia, tal como uma cama ou sofá, onde as aberturas de ar possam ficar obstruídas.
- Não utilize o dispositivo próximo de roupas largas ou joalharia.
- Mantenha os cabelos longos afastados do dispositivo quando este está a ser utilizado.
- A limpeza e a manutenção feitas pelo utilizador não devem ser feita por crianças sem supervisão.
- Não remova parafusos nem tente desmontar o dispositivo.
- Não opere continuamente durante mais de uma hora. Após uma hora de utilização, deixe o dispositivo repousar durante 30 minutos antes de o voltar a utilizar.
- Desligue o dispositivo da tomada de corrente após o carregamento e antes de o utilizar.
- Utilize o dispositivo apenas em conformidade com as Instruções de Operação.
- Quando utilizar o Hypervolt Go 3, utilize-o apenas em superfícies secas e limpas do corpo, pressionando ligeiramente e deslocando-o ao longo do corpo durante aproximadamente sessenta (60) segundos por região. O Hypervolt Go 3 só deve ser utilizado em áreas de tecidos moles do corpo e não deve ser utilizado em quaisquer áreas duras ou ósseas do corpo, incluindo a cabeça. Interrompa imediatamente a utilização do Hypervolt Go 3 se sentir qualquer dor ou desconforto, para além de uma ligeira dor muscular. Podem ocorrer nódoas negras com a utilização da Hypervolt Go 3, independentemente da definição da pressão, e se ocorrerem nódoas negras, não deve utilizar a Hypervolt Go 3 na área magoada até a nódoa negra ter desaparecido completamente. A utilização do Hypervolt Go 3 deve também ser evitada sobre todas as áreas com nódoas negras, erupções, irritações ou com ferimentos da pele, até estas estarem totalmente curadas. Quando utilizar o Hypervolt Go 3, certifique-se de que mantém os dedos das mãos e dos pés, o cabelo e outras partes do corpo afastados da parte de trás da cabeça do acessório, para evitar entalar o cabelo ou beliscaduras.
- O Hypervolt Go 3 deve ser usado apenas nas áreas de tecido muscular. O Hypervolt Go 3 não deve ser usado em áreas duras ou ósseas do corpo, incluindo a cabeça e a coluna vertebral, os lados ou a frente do pescoço, a virilha interna ou a parte de trás do joelho. Por favor, pare imediatamente de usar o Hypervolt Go 3 ao sentir qualquer dor ou desconforto, exceto dores musculares leves. Podem ocorrer hematomas pelo uso do Hypervolt Go 3, independentemente da configuração de pressão, e se ocorrerem hematomas, você não deve usar o Hypervolt Go 3 na área machucada até que o hematoma esteja completamente cicatrizado. O uso do Hypervolt Go 3 também deve ser evitado em todos os hematomas, contusões, erupções cutâneas ou áreas irritadas ou lesionadas da pele até que estejam totalmente curadas. Ao usar o Hypervolt Go 3, certifique-se de manter os dedos, os dedos dos pés, os cabelos e outras partes do corpo afastados da parte de trás da cabeça do acessório para evitar beliscões ou enrosco de cabelo.

O Hypervolt Go 3 destina-se a ser carregado com o cabo Hyperice USB-C

fornecido ou por uma porta USB de 5V. Não carregue o Hypervolt Go 3 durante a noite nem o deixe sem supervisão ao carregar ou quando em utilização. Utilizar apenas com uma fonte de alimentação ITE listada/certificada.

Não utilize o Hypervolt Go 3, ou qualquer dispositivo de percussão, sem primeiro obter a aprovação do seu médico, caso exista algum das seguintes situações:

- Gravidez, diabetes com complicações tais como neuropatia ou danos na retina, a utilização de pacemakers, cirurgia ou ferimentos recentes, epilepsia ou enxaquecas, hérnias discais, espondilolistese, espondilólise, ou espondilose, substituições recentes de articulações ou DIUs, pinos ou placas metálicas ou quaisquer preocupações sobre a sua saúde física. Os indivíduos frágeis e as crianças devem ser acompanhados por um adulto ao utilizarem qualquer dispositivo de percussão ou vibração. Estas contra-indicações não significam que não possa utilizar um dispositivo de percussão ou vibração, mas aconselhamos que, antes de o fazer, consulte o seu médico. Estão em curso investigações sobre os efeitos das massagens de percussão em doenças específicas que podem resultar na redução da lista de contra-indicações incluída acima.
- Use os aparelhos apenas com baterias especificamente designadas. O uso de qualquer outra bateria pode criar risco de lesões e incêndio.
- Em condições adversas, pode haver vazamento de líquido da bateria; evite o contato. Caso ocorra contato acidental, lave com água. Se o líquido entrar em contato com os olhos, procure ajuda médica imediatamente. O líquido expelido da bateria pode causar irritações ou queimaduras.
- Não utilize baterias ou aparelhos danificados ou modificados. Baterias danificadas ou modificadas podem apresentar comportamentos imprevisíveis, resultando em incêndio, explosão ou risco de lesões.
- Não exponha o aparelho ao fogo ou a temperaturas excessivas. A exposição ao fogo ou a temperaturas superiores a 130 °C pode causar explosão.
- Siga todas as instruções de carregamento e não carregue o aparelho fora da faixa de temperatura especificada nas instruções. Carregar de forma inadequada ou fora da faixa indicada pode danificar a bateria e aumentar o risco de incêndio.
- A manutenção deve ser realizada por um técnico qualificado, utilizando apenas peças de reposição idênticas. Isso garantirá a manutenção da segurança do produto.
- Não modifique nem tente reparar o aparelho, exceto conforme indicado nas instruções de uso e manutenção.

O Hypervolt Go 3 contém uma bateria, que deve ser eliminada em segurança numa instalação de resíduos eletrônicos ou de reciclagem adequada.

CUIDADO

A bateria utilizada neste dispositivo poderá representar um risco de incêndio ou de queimaduras químicas, se for manuseada de forma incorreta. Não desmonte, não aqueça acima de 100 °C nem elimine a bateria por incineração. Elimine imediatamente a bateria usada. Mantenha-a afastada de crianças. Não a desmonte nem elimine por incineração.

GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES

O Hypervolt Go 3 é um dispositivo de massagem de percussão portátil que fornece impulsos de pressão direcionados para cuidar dos músculos, aliviar a tensão, proporcionar uma massagem relaxante, acelerar o aquecimento e a recuperação e ajudar a manter a flexibilidade e a amplitude de movimentos.

Operação

Ligue o Hypervolt Go 3 premindo e mantendo premido o botão para ligar/desligar a alimentação durante 0,5 segundos. Logo que o dispositivo esteja ligado, o indicador do nível da bateria (banda LED) na base do punho irá acender-se. Rode o seletor digital de velocidade para alterar as velocidades (1-5). As luzes irão indicar a velocidade atual. Para desligar, basta manter premido o botão para ligar/desligar durante 0,5 segundos.

Mudar os acessórios da cabeça

Mude os acessórios apenas depois da regulação da velocidade estar na posição desligada e o acessório da cabeça ter parado de se mover. Para mudar os acessórios da cabeça, puxe o acessório da cabeça existente para fora para o retirar e insira a cabeça pretendida diretamente na abertura, empurrando-a com firmeza.

Carregamento


Carregue totalmente a bateria durante quatro horas antes da primeira utilização. Para carregar, ligue o cabo USB-C à porta de carregamento situado na parte inferior da pega e ligue o cabo a um adaptador USB-A. Em seguida, ligue o adaptador à tomada elétrica. Um banda de luz LED irá piscar para mostrar o nível da bateria e indicar o carregamento ativo. As cores da banda de luz LED correspondem ao nível de carregamento, indo de vermelho (baixo) até verde (totalmente carregado). A carga completa é indicada quando a banda LED permanece verde e totalmente iluminada. A bateria pode ser recarregada em qualquer altura e em qualquer nível de bateria. Não é recomendável esgotar totalmente a bateria até ao nível do LED vermelho. O tempo médio de funcionamento é superior a 2 horas, dependendo do nível de velocidade e da pressão aplicada durante a utilização. Recomenda-se que o dispositivo seja desligado quando não estiver a ser utilizado ou durante o armazenamento e as deslocações.

Limpeza e armazenamento

Certifique-se de que o dispositivo está DESLIGADO e que o carregador da bateria não está ligado. Utilize um pano húmido e limpo e limpe suavemente o Hypervolt Go 3. Guarde-o num local limpo, fresco e seco, não exposto à luz solar direta quando não estiver em utilização.

Especificações

1. Acessórios de cabeça intercambiáveis (2)
2. Seletor digital de velocidade
3. Indicadores de velocidade (5)
4. Botão para LIGAR/DESLIGAR
5. Indicador do nível da bateria (banda LED)
6. Porta de carregamento

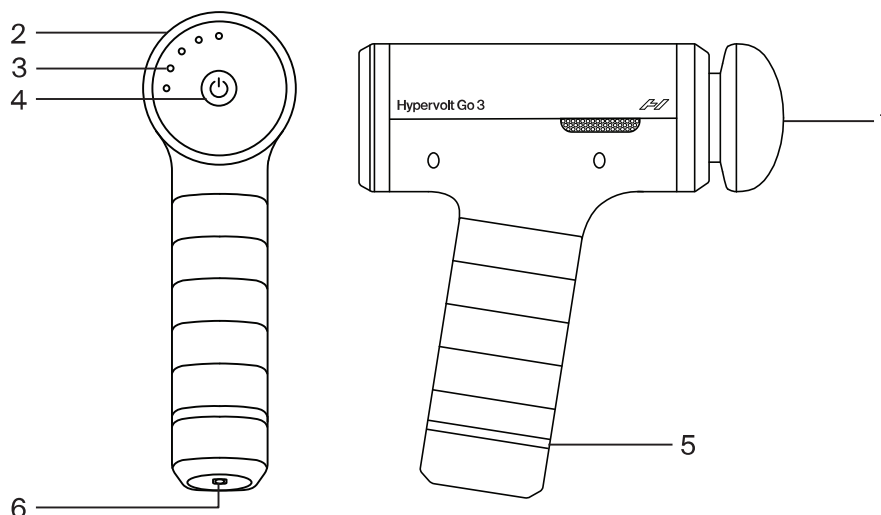

5V $\overline{=}$ 2A

Temperatura de operação: +0 °C a +45 °C [+32 °F a +113 °F]

Temperatura de armazenamento: +20 °C a +60 °C [+4 °F a +158 °F]

Capacidade nominal: 7,2V, 4250 mAh, 30,6Wh

Temperatura de carregamento: +5 °C a +40 °C [+41 °F a +104 °F]

Frequência: Nível 1 - 1500/25 Hz, Nível 2 - 1750/29 Hz, Nível 3 - 2000/33 Hz, Nível 4 - 2250/38Hz, Nível 5 - 2500/42Hz

Peso: 0,7 kg [1,6 lbs]

Garantia

Este produto está coberto por uma garantia limitada da Hyperice. Visite o site hyperice.com/warranty para ver as condições da garantia aplicável no seu país

Reciclagem

Visite o site <https://hyperice.com/recycling> para obter informações sobre a reciclagem desta embalagem.



APENAS PARA O MÉXICO

- Este aparelho não se destina a ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) cujas capacidades físicas, sensoriais ou mentais sejam diferentes ou reduzidas, ou que não tenham experiência ou conhecimentos, exceto se essas pessoas tiverem recebido supervisão ou formação sobre a utilização do aparelho por uma pessoa responsável pela sua segurança.
- As crianças devem ser supervisionada para garantir que não utilizam os dispositivos como brinquedos.
- O aparelho só deve ser alimentado com a tensão extra-baixa de segurança indicada no aparelho..
- A bateria deve ser retirada do aparelho antes de ser eliminada. O aparelho deve ser desligado do carregador quando a bateria é retirada. A bateria é retirada para ser eliminada de forma segura.
- A operação deste equipamento está sujeita às duas condições seguintes: (1) este equipamento ou dispositivo não pode causar interferências prejudiciais e (2) este equipamento ou dispositivo deve aceitar quaisquer interferências, incluindo interferências que possam causar um funcionamento indesejado.